



Ліжко з електроприводом та регулюванням висоти (4 секції)

OSD-9018

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Використання	5
5.	Технічне обслуговування і догляд.....	9
6.	Належна утилізація продукту	9
7.	Відомості про сертифікацію.....	10
8.	Умови гарантії	11

[2]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.



Не використовуйте медичне ліжко, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте медичне ліжко у випадку його пошкодження.

Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ліжко з електроприводом «OSD-9018» (далі за паспортом – функціональне ліжко / медичне ліжко / електричне ліжко / ліжко / виріб) – це пристосування для інвалідів або людей похилого віку, які змушені тривалий час перебувати у постільному режимі.

Електричне ліжко «OSD-9018» рекомендоване для застосування у медичних закладах та вдома людям, позбавленим можливості пересуватися самостійно та користувачам, яким потрібен постійний нагляд медперсоналу.

Ліжко «OSD-9018» розроблене для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

- Перед початком використання ліжка або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіковані.
- Медичні ліжка повинні **ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ** проінструктованими особами (персоналом).
- До початку користування ліжком, асистент повинен **ПЕРЕКОНАТИСЯ** у тому, що ліжко не нанесе пацієнту ніякої шкоди.
- Під час використання ліжка **СЛІДКУЙТЕ** за тим, щоб ніякі сторонні предмети, частини тіла чи одягу не потрапляли до механізму.
- ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ** виріб пацієнтами молодше 12 років (дітьми).
- НЕ МОЖНА** одночасно застосовувати декілька функції виробу.
- УНИКАЙТЕ** потрапляння рідин до електричних деталей ліжка.
- Ремонт будь-яких частин виробу **ПОВИНЕН ПРОВОДИТИ** лише кваліфікований персонал із застосуванням оригінальних інструментів.
- НЕ СТВОРЮЙТЕ** перепони для роботи двигунів.
- Користувачам, які тривалий час змушені перебувати у постільному режимі, **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** використовувати спеціальні протипролежневі матраци для профілактики

та лікування пролежневих ран. Виробник ліжка **НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ** за виникнення у пацієнта пролежнів.

11. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан , адже усі елементи з часом зношуються.
12. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
13. **БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
14. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
15. Максимальне навантаження на ліжко – 200 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!



На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути перехресних інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування ліжка, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-9018
Кількість секцій:	4
Привід:	електричний
Кут підйому головної секції:	80°
Кут підйому ножної секції:	35°
Висота ложа від підлоги, (см):	від 37 до 72
Регулювання ліжка за висотою:	Так
Поруччя:	Так

Трапеція:	Hi
Функція «Тренделенбург» та «анти-Тренделенбург»:	Hi
Діаметр коліс, (дюйм):	5"
Габаритні розміри, Д x Ш, (см):	216 x 96
Розмір ложа, Д x Ш, (см):	205 x 88
Максимальне навантаження на ліжко, (кг):	200

4. Використання

Підготовка до експлуатації

1. Розкрийте упаковку та перевірте належну комплектацію.
2. Для зручності доставки ліжко поставляється у розібраному вигляді. Відкриваючи упаковку з виробом, потрібно перевірити цілісність деталей та наявність документів. Збережіть документи для подальшого використання.
3. Основна конструкція ліжка не вимагає зборки.
4. Установіть та закріпіть головну секцію та частину, яка розташована у ногах на рамі ліжка.
5. Ліжко має бути встановлено на рівній поверхні без ухилюв.
6. Місце для розміщення ліжка повинно виключати випадкові удари та поштовхи.
7. Ліжко потребує постійної дезінфекції: чистіть та дезінфікуйте ліжко перед кожним використанням (першим та повторними).
8. Колеса повинні бути заблокованими.
9. Обережно пересувайте ліжко.
10. Ніякі перешкоди (нічні столики, кабельні жолоби, стільці тощо) не повинні завадити регулюванню.
11. Переконайтесь, що усі регулювальні функції ліжка правильно працюють та знаходяться у належному стані.

Складання багатофункціонального ліжка



Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятися від оригінального продукту.

1. Розпакуйте усі елементи ліжка.
2. За допомогою гвинтів приєднайте ніжки з колесами до каркасу ліжка (див. Рис. 1):

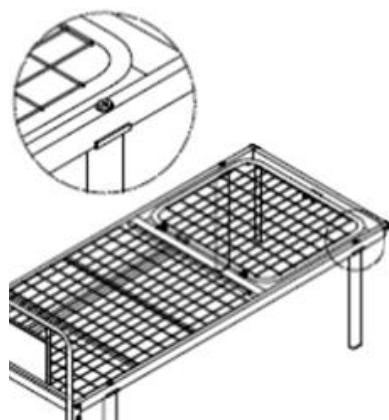


Рис. 1

3. За допомогою засувок приєднайте та закріпіть спинки до каркасу ліжка (менша спинка в ногах, більша у головній частині). (див. Рис. 2, 3):



Рис. 2

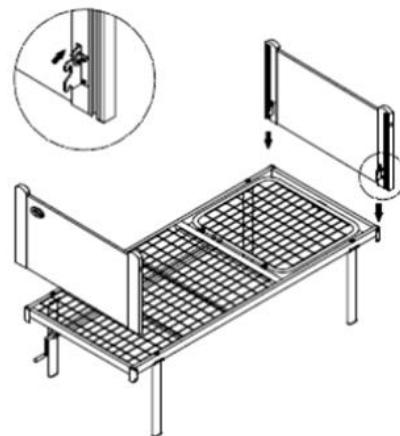


Рис. 3

4. Зніміть спеціальні заглушки з двигуна та закріпіть двигун у належному місці на каркасі ліжка. Переконайтесь, що двигун закріплений вірно відносно головної/ножної секцій. Зафіксуйте двигун заглушками та перевірте надійність кріплення. Підключіть дроти живлення у відповідні отвори. Правий отвір для двигуна головної секції, центральний для пульта управління, лівий – для ножної секції (див. Рис. 4).



Рис. 4

УВАГА



Якщо двигун був установлений на виробництві, пропустіть цей пункт.

5. Закріпіть поруччя ліжка з обох боків за допомогою спеціальних закруток. Перед експлуатацією переконайтесь, що поруччя закріплено надійно. (див. Рис. 5).



Рис. 5

6. Закріпіть обмежувачі для матрацу у спеціальні отвори на каркасі ліжка (див. Рис. 6):



Рис. 6


Управління пультом керування

Керування ліжком здійснюється за допомогою пульта, який дозволяє легко відрегулювати кут нахилу головної та ножної секцій, а також висоту ліжка над підлогою. Пульт керування простий у використанні, фіксується на бічні поручні на комфортній для користувача відстані.



Регулювання положення головної секції

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.

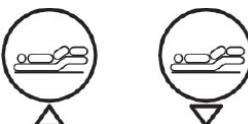


Регулювання положення ножкої секції

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



Одночасне регулювання ножкої та головної секцій

Проводиться за допомогою лівої кнопки (одночасний підйом) та правої кнопки (одночасне опускання) на пульті управління.

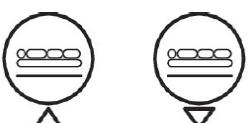

Регулювання висоти ліжка над підлогою

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



На пульті керування передбачено блокування від небажаного натискання. Активна перша (нижня) позиція забороняє управляти усіма позиціями окрім кута нахилу головної секції, середня – блокує керування усім позиціям, верхня – дозволяє керувати усіма передбаченими позиціями. (опціонально) (див. Рис. 7).

Рис. 7



Для того, щоб опустити або підняти поруччя необхідно натиснути на червоний важіль, який знаходиться біля краю поруччя зі сторони головної секції (див. Рис. 8).

Рис. 8



Для блокування коліс слід натиснути на нижню частину гальмівного фіксатору, а щоб розблокувати колеса слід натиснути на верхню частину гальмівного фіксатору (див. Рис. 9).

Рис. 9

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність ліжка перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Догляд

Поверхню ліжка обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте ліжко у чистоті для використання протягом тривалого терміну.

Металеві частини очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ліжко м'якою та чистою ганчіркою.

Для обробки дерев'яних частин використовуйте засоби для очищення меблів. Зміна кольору компонентів під дією ультрафіолету, вологи або температури не є дефектом і не покриваються гарантією.

Переконайтесь, що усі гвинти та елементи регулювання надійно зафіксовані.


У разі виникнення будь-яких негараздів, негайно зв'яжіться з найближчим дилером. Ніколи не використовуйте несправне ліжко та не намагайтесь ремонтувати його самостійно!

Тривале зберігання

1. Поверніть ліжко у початкову позицію.
2. Від'єднайте усі кріплення.
3. Зніміть усі аксесуари.
4. Покладіть на ліжко простирадло.
5. Враховуйте усі фактори навколишнього середовища (влога, температура тощо).

6. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

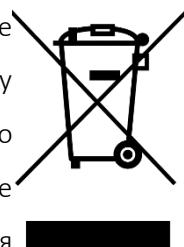

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

² Медичне ліжко «OSD-9018» відповідає технічним умовам і визнане придатним для експлуатації.

7. Відомості про сертифікацію

Медичне ліжко «OSD-9018» відповідає технічним вимогам і визнано придатними для експлуатації.



Виробник: Hong Ky Co., Ltd / Гонг Ки Ко., Лтд

D2 Street, Binh Chuan Manufacturing Zone, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam / Д2 Стрет, Бінг Чуан Мануфактурінг Зоне, Тхуан Ан, Бінг Дуонг Провінція, В'єтнам.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 5 від 21.02.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **медичне ліжко «OSD-9018»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюються за рахунок клієнта.



8. Умови гарантії



ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____